

INFORMATION PRODUIT

LE CONFORT DE L'EMBOÎTURE



©Copyright 2023, OKO Solution S.A.S. Rousset, France - 14/02/23


*Manchons Silicone, Manchons Copolymère,
Genouillères, Gaines, Bonnets, Soins de la Peau...*

INTRODUCTION	3
MANCHONS SILICONE	
ClearSil.compression	8
ClassicSil.basic	9
ComfortSil.basic	10
ComfortSil.soft.....	11
SkinCareSil.basic	12
SkinCareSil.soft.....	13
AK-Control.sil.....	14
Control4Sil.basic.....	16
Control4Sil.conic	17
MANCHONS EN GEL DE COPOLYMÈRE	
ContexGel.basic	18
ContexGel.soft.....	20
ContexGel.soft+.....	22
AIDE À L'APPLICATION	24
PRODUITS ET ACCESSOIRES DE SOINS	30
GAINES ET BONNETS	32
TABLE DES SYMBOLES	45



OKO Solution le choix des plus grandes marques de l'orthopédie mondiale. **Prothèses, Orthèses, Matériaux, Machines**, une offre unique sur le marché du grand appareillage avec une gamme complète et diversifiée de plus de 10000 références, adaptées à chacune de vos problématiques.

Informations de commandes

Un service de livraison qui prend en charge vos produits le jour même. 80 % des commandes sont livrées en moins de 24 h depuis notre entrepôt. Notre partenariat avec  vous assure une fiabilité de livraison en France et dans les DROM-COM.

Toutes les commandes doivent être envoyées par email à commandes@okosolution.com, par téléphone au 04 88 19 60 10 ou par Fax au 04 42 29 50 43



LE CONFORT DE L'EMBOÎTURE




Une gamme complète allant des manchons, à la thérapie par compression avec les bonnets élasto-compressifs.

Streifeneder ortho.production GmbH propose une gamme complète de haute qualité dans le domaine des prothèses de membres inférieurs au travers d'un grand choix de manchons silicone et copolymère, d'aides à l'application, de gaines et bonnets et d'accessoires de soins pour le confort de l'emboîture. Tous les produits se caractérisent par l'utilisation de matériaux de première qualité, un haut niveau de fonctionnalité allié à une durabilité sans égal. De nombreuses propriétés ont été améliorées et assurent une stabilité et un confort encore plus grands lors du port de prothèses de membres inférieurs. Tous les articles de notre gamme sont parfaitement adaptés pour être utilisés ensemble et permettent également aux spécialistes de répondre aux demandes individuelles des utilisateurs. Selon le profil de l'utilisateur, les manchons, les aides à l'application et les gaines et bonnets sont disponibles en différents modèles et dans de nombreuses tailles.



Fonctionnalité améliorée avec les caractéristiques suivantes :

- *nouveau design et nouvelle technologie de tricotage fonctionnel circulaire*
- *nouveau modèle de manchon : Le SkinCareSil pour les moignons sensibles*
- *meilleur ajustement et facilité d'utilisation*
- *des propriétés de rembourrage optimisées dans tous les modèles de revêtement en gel Contex*
- *nouvelles cupules terminales anti-rotation souples en silicone*
- *ligne d'orientation en couleur, numéro de série tricoté dans le tissu*
- *propriétés antibactériennes*

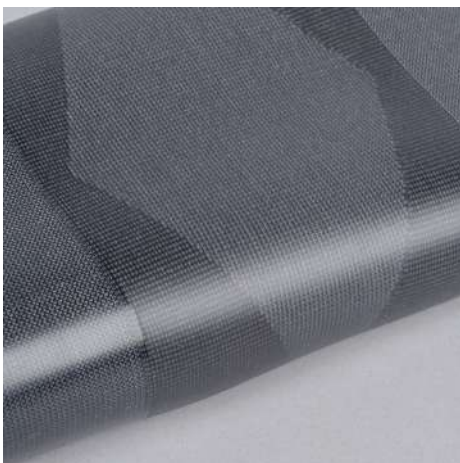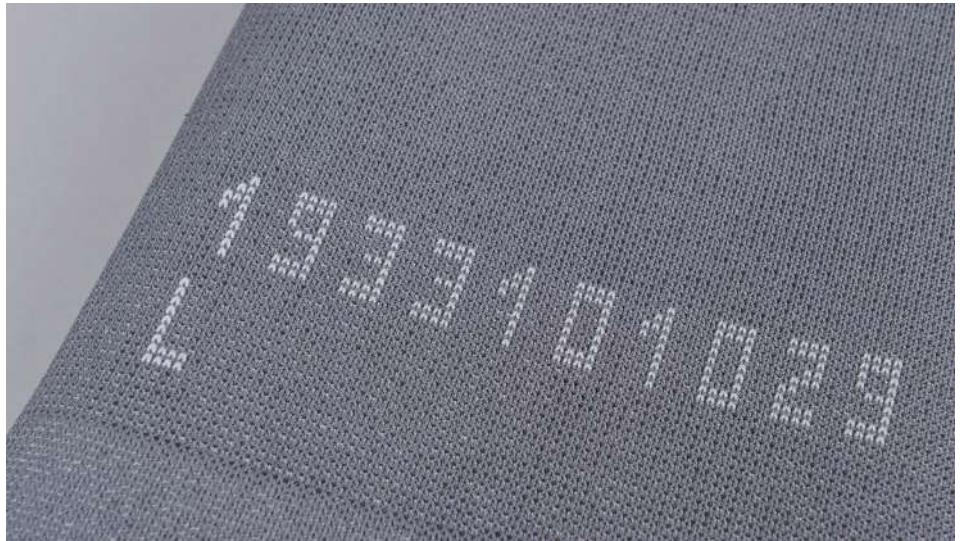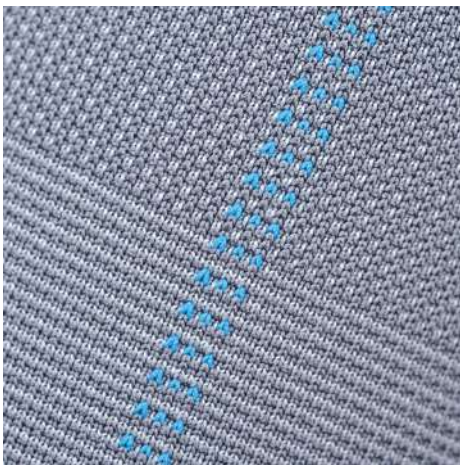

UNE NOUVELLE TECHNOLOGIE DE TRICOT POUR UNE MEILLEURE QUALITÉ

Les coutures latérales des Manchons Silicone et Gel de Copolymère sont souvent sujettes à une usure prématurée due au frottement. Le développement de cette nouvelle technologie de tricotage fonctionnel circulaire a permis de créer un revêtement sans aucune couture latérale.

Cela signifie que les produits sont nettement plus durables et résistants que les anciens modèles. Grâce à l'utilisation d'un fil d'élasthanne solide en combinaison avec du polyamide de haute qualité, le matériau de revêtement est facile à rouler et robuste. Une ligne d'orientation en couleur est intégrée, ainsi que la taille et le numéro de série pour une parfaite traçabilité.



COMMENT CHOISIR LE BON MANCHON

Trouvez sa taille de Manchon Silicone

Mesurez la circonférence à 4 cm de l'extrémité distale et sélectionnez le manchon de la même taille (si c'est la première fois que vous utilisez le produit) ou d'une taille inférieure (si vous avez déjà utilisé le produit).

Trouvez votre taille de Manchon en Gel Copolymère

Mesurez la circonférence à 4 cm de l'extrémité distale et sélectionnez la taille du manchon ContexGel dans la plage de la circonférence distale et proximale du membre résiduel (mesurée 30 cm au-dessus de l'extrémité distale du moignon).

Coupez un manchon en silicone

Coupez le bord du manchon à l'aide de ciseaux à vagues (réf : N166P36) pour réduire les tensions circulaires. Veillez à ne pas couper le manchon trop court ; il vaut mieux le laisser plus long.

Comment entretenir mon manchon ?

Avant de porter le manchon pour la première fois, il doit être soigneusement lavé avec la Lotion Skin Care Wash N10H2 pour éviter toute irritation cutanée potentielle.



AVANTAGES DES MANCHONS EN SILICONE STREIFENEDER

Un Manchon avec un label qualité

Pour augmenter le niveau d'hygiène lors de l'utilisation des manchons, nous utilisons des additifs spéciaux qui créent un effet de surface aseptique. L'un de ces additifs s'appelle «SteriOne» et est vendu par la société du même nom, SteriOne GmbH. Cette technologie brevetée garantit que le manchon fini est maintenu en permanence à l'abri de la colonisation de bactéries et de micro-organismes. Les manchons fabriqués par Streifeneder ortho.production GmbH portent un label qualité et sont donc certifiés «antibactériens». Le symbole ci-dessous montre l'utilisation de stérions pour obtenir l'effet antibactérien. Cet effet a également été confirmé par un autre institut de contrôle indépendant.

Un label de qualité qui garantit :

- efficacité pendant au moins cinq ans
- l'élimination d'au moins 5 millions de germes par heure et par cm²

L'utilisation de stérions contribue à prévenir :

- les bactéries (par exemple les pneumocoques et les micro-organismes multi résistants tels que le SARM).
- souches test de Staphylococcus doré et Escherichia coli.

Contrôle de la rotation pour les modèles ClassicSil, ComfortSil, SkinCareSil et AK-Control.Sil

- Plus une plus grande stabilité en rotation entre le revêtement et l'emboîture.
- Pour une meilleure direction et contrôle de la prothèse.

Bande anti-rotation dans le modèle AK-Control. Sil N60L1

- Plus une plus grande stabilité en rotation entre le revêtement et l'emboîture.
- Pour une meilleure direction et un meilleur contrôle de la prothèse trans-fémorale Tricot circulaire gris/argent avec fonction de déroulement et de durabilité.





AVANTAGES DES MANCHONS EN GEL STREIFENEDER :

- Les propriétés viscoélastiques du gel copolymère assurent une répartition uniforme de la pression dans l'emboîture, c'est-à-dire que les forces de pression et de cisaillement sont réduites de manière significative.
- Les huiles blanches médicinales contenues dans le gel copolymère nourrissent la peau contrainte du membre résiduel et aident celle-ci à retrouver son hydratation naturelle.
- Un Additif à effet de surface aseptique dans le gel copolymère.
- Les manchons ContexGel sont thermoformables à 60 °C pour une adaptation optimale aux formes de membres résiduels non standard.
- Différentes épaisseurs de la paroi antérieure disponibles (3, 6, 9 mm) tandis que la paroi postérieure, plus mince, reste de la même épaisseur (3 mm), ce qui signifie que, notamment dans les zones sensibles à la pression, un amortissement supplémentaire est apporté en substitution des tissus mous.
- Une forme conique pour mieux s'adapter à la plupart des membres résiduels.
- Il peut être fourni avec une connexion distale pour tous les types et systèmes de verrouillage de Streifeneder ortho.production
- Il peut être fourni sans connexion distale pour la modélisation ciblée des membres résiduels et pour la technique de sous vide (VST)
- Parfaitement adapté aux soins prothétiques des membres résiduels transtibiaux, pour les utilisateurs ayant un niveau d'activité faible à moyen, avec des complications résiduelles au niveau des membres
- Revêtement circulaire sans couture autoglissant gris anthracite fonctionnel facilitant la mise en place et augmentant la durabilité.

Le confort de l'emboîture : Le bonnet

- Grand choix de bonnet pour les membres résiduels transfémoraux et transtibiaux et les membres supérieurs
- Disponible avec et sans ouverture pour les attaches distales, en différentes épaisseurs, matières et couleurs
- Traitement de compression postopératoire
- Égaliser les changements de volume dans le membre résiduel
- Augmente la durée de vie de tous les manchons
- Amortissement supplémentaire pour le manchon
- Respirable
- Durable



Genouillère d'étanchéification : ContexGel.sleeve

Les genouillères d'étanchéification ContexGel.sleeve de Streifeneder ortho.production garantissent la suspension et l'ajustement corrects des prothèses de membres inférieurs. En ce qui concerne la technique de sous vide (VST) en particulier, un système étanche dans lequel aucun air ne peut pénétrer est particulièrement adapté aux prothèses transtibiales.

La ContexGel.sleeve agit comme une genouillère d'étanchéité qui empêche l'air de pénétrer, et qui avec la valve de dépressurisation, maintient fermement la prothèse de membre inférieur sur le moignon de l'utilisateur.

En position debout et pendant les périodes de station debout, la valve de dépressurisation crée une basse pression continue, empêchant ainsi la prothèse de glisser et minimisant les forces de cisaillement et de friction inconfortables sur le membre résiduel.





Les formes traditionnelles d'application des prothèses se retrouvent dans un design moderne avec nos AK-Suspender et BK-Suspender (N300A1 et N23A1). Ces suspensions dites de soutien pour les prothèses transfémorales et transtibiales créent également la bonne connexion et apportent un soutien dans le contrôle des prothèses de membres inférieurs.

LA GAMME MANCHONS EN UN COUP D'OEIL

MANCHONS SILICONE

	ClearSil.compression	SkinCareSil.basic SkinCareSil.soft	ComfortSil.basic ComfortSil.soft	ClassicSil.basic
NIVEAU D'ACTIVITÉ				
EN FORME DE POIRE, AMPUTATION TRANS-TIBIALE 	XXX post-opératoire	XX 3 mm basic	X 3 mm basic	X 3 mm basic
EN CYLINDRE, AMPUTATION TRANS-TIBIALE 	XXX post-opératoire	XXX 3 mm basic	XXX 3 mm basic	XXX 3 mm basic
CÔNIQUE OSSEUSE, AMPUTATION TRANS-TIBIALE 		XXX 6 mm basic	XXX 6 mm soft	
CYLINDRIQUE, AMPUTATION TRANS-FÉMORALE 	XXX post-opératoire			
CÔNIQUE, AMPUTATION TRANS-FÉMORALE 	XXX post-opératoire			

MANCHONS COPOLYMÈRE

AKControl.Sil	Control4Sil.basic	Control4Sil.conic	ContexGel.Basic ContexGel.Soft ContexGel.Soft+
			
<p style="text-align: center;">×</p>			<p style="text-align: center;">× ×</p>
<p style="text-align: center;">× ×</p> <p>Pour large moignon tibial</p>			<p style="text-align: center;">× × ×</p>
			<p style="text-align: center;">× × ×</p>
<p style="text-align: center;">× × ×</p>	<p style="text-align: center;">× × ×</p>		<p style="text-align: center;">× × ×</p> <p>Utiliser seulement la version en 3 mm</p>
<p style="text-align: center;">×</p>		<p style="text-align: center;">× × ×</p>	<p style="text-align: center;">× × ×</p>

× × × = optimal

× × = bon

× = correct



ClearSil.compression

TT TF

L.P.P
7782589

INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon postopératoire sans matrix interne et sans connexion distale.


- Compression ciblée du moignon après l'amputation de la jambe
- Adaptation précoce à l'utilisation d'un manchon en silicone
- Formation précoce du moignon

CARACTÉRISTIQUES

- Silicone sans matrix interne et sans connexion distale
- **Compression contrôlée**
- Le bandage n'est pas nécessaire, donc pas de restriction due à un mauvais bandage
- **Améliore la circulation** sanguine et réduit l'accumulation d'œdèmes

MATÉRIAU

- **Épaisseur de la paroi** : voir croquis
- **ClearSil-Silicone, ferme, antibactérien**
- Env. 50 Shore 00
- Sans revêtement textile
- **Couleur** : translucide
- **Garantie** : 6 mois

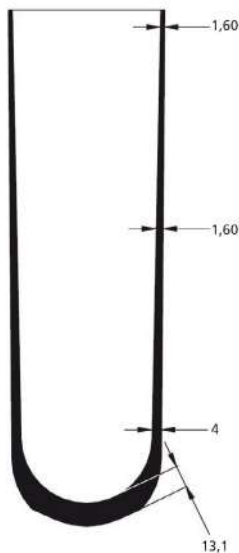

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	RÉFÉRENCE
23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	N70L1-...

Exemple de commande: N70L1-23,5 = taille 23,5.

La bonne taille : Pour l'application d'un manchon en silicone sans doublure textile, il faut utiliser le spray de soins de la peau N10H5. Veuillez utiliser le tableau de compression fourni pour ce qui concerne le volume du membre résiduel.





ClassicSil.basic (3 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone ferme de 3 mm.


- Niveau d'activité: 2 à 4
- Excellent pour les soins prothétiques standard
- Pour les membres résiduels à pression moyenne avec suffisamment de tissus mous
- Polyvalent

CARACTÉRISTIQUES

- En silicone ferme de 3 mm
- Un confort optimal et une absorption confortable des chocs
- Revêtement textile d'une pièce pour enrouler facilement la doublure
- Avec matrix extérieure distale intégrée de 10 cm, réduisant l'allongement distal
- Bande verticale colorée intégrée à l'avant, pour une meilleure orientation
- Le contrôle de la rotation distale permet de guider la prothèse
- Disponible avec connexion distale et contrôle de rotation pour toutes les attaches distales Streifeneder
- Disponible sans connexion distale, mais avec contrôle de rotation pour la technologie de prise par le vide

MATÉRIAU

- **Épaisseur de la paroi 3 mm** : voir croquis
- Silicone médical particulièrement ferme, avec une finition antibactérienne
- Env. 40 Shore 00
- Tissu externe textile tricoté d'une seule pièce permettant de rouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Contrôle de rotation distale en silicone
- **Couleur** : gris argenté
- **Garantie** : 6 mois

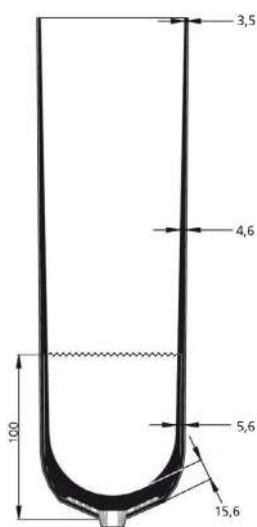

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	ÉPAISSEUR	MATRICE EXTERNE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	avec	N50L10-...
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sans	sans	N50L20-...



Exemple de commande: N50L10-16 = avec attache distale, taille 16. Fourni avec support de séchage.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



ComfortSil.basic (3 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone de 3 mm particulièrement souple.


- Niveau d'activité: 1 à 3
- Excellent pour les soins prothétiques de base en gériatrie
- Convient aux membres résiduels sensibles à la pression

CARACTÉRISTIQUES

- En silicone particulièrement souple de 3 mm
- Un confort optimal et une absorption confortable des chocs
- Revêtement textile d'une seule pièce pour enrouler facilement le manchon
- Avec matrix extérieure distale intégrée de 10 cm, réduisant l'allongement distal bande verticale colorée intégrée à l'avant, pour une meilleure orientation
- Le contrôle de la rotation distale permet de guider la prothèse
- Disponible avec connexion distale et contrôle de rotation pour toutes les attaches distales et verrous Streifeneder
- Disponible sans connexion distale, mais avec contrôle de rotation pour la technologie de prise par le vide

MATÉRIAU

- **Épaisseur de la paroi 3 mm** : voir croquis
- Silicone médical particulièrement souple, avec une finition antibactérienne
- Env. 26 Shore 00
- Tissu externe textile tricoté d'une seule pièce permettant de rouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Contrôle de rotation distal en silicone
- **Couleur** : gris argenté
- **Garantie** : 6 mois

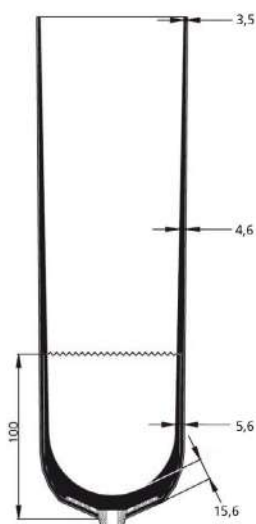

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	ÉPAISSEUR	MATRICE EXTERNE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	10 cm	avec	N40L10-...
16, 18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	3 mm	sans	sans	N40L20-...



Exemple de commande: N40L10-16 = avec attache distale, taille 16. Fourni avec support de séchage.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



ComfortSil.soft (6 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone de 6 mm particulièrement souple.


- Niveau d'activité: 1 à 3
- Excellent pour les soins prothétiques de base en gériatrie
- Convient aux membres résiduels très sensibles à la pression
- Pour les membres résiduels osseux avec une faible couverture des tissus mous

CARACTÉRISTIQUES

- En silicone particulièrement souple de 6 mm
- Un confort de port optimal et une absorption confortable des chocs
- Revêtement textile d'une seule pièce pour enrouler facilement la doublure
- Avec matrix extérieure distale intégrée de 10 cm, réduisant l'allongement distal
- Bande verticale colorée intégrée à l'avant, pour une meilleure orientation
- Le contrôle de la rotation distale permet de guider la prothèse
- Disponible avec connexion distale et contrôle de rotation pour toutes les attaches distales et verrous Streifeneder
- Contrôle de rotation disponible pour la technologie de prise par le vide

MATÉRIAU

- **Épaisseur de la paroi 6 mm** : voir croquis
- Silicone médical particulièrement souple, avec une finition antibactérienne
- Env. 26 Shore 00
- Tissu externe textile tricoté d'une seule pièce permettant de rouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Contrôle de rotation distal en silicone
- **Couleur** : gris argenté
- **Garantie** : 6 mois

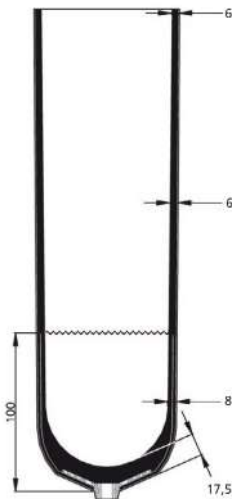

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	ÉPAISSEUR	MATRICE EXTERNE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	10 cm	avec	N41L10-...
18, 21, 22, 23,5, 25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45	6 mm	sans	sans	N41L20-...



Exemple de commande: N41L10-16 = avec attache distale, taille 16. Fourni avec support de séchage.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



SkinCareSil.basic (3 mm)




INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone de 3 mm particulièrement souple avec un additif à l'aloë vera.

- Spécialement pour le soin des membres résiduels sensibles à la pression avec des maladies cutanées et/ou vasculaires
- Très bien adapté pour les utilisateurs peu actifs, en mise initiale ou pour les soins gériatriques

CARACTÉRISTIQUES

- En silicone particulièrement souple de 3 mm
- Propriétés soignantes pour la peau grâce à l'aloë vera contenu dans le silicone
- Confort et amortissement optimaux
- Tissu externe textile tricoté d'une seule pièce permettant de rouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Avec matrix externe tricoté de 10 cm, réduisant l'effet de pompage (soulèvement distal)
- Grande élasticité transversale - également dans la zone distale
- Ligne verticale tricotée de couleur à l'avant servant de repère pour faciliter et contrôler la bonne mise en place ou le retrait
- Le contrôle de rotation distale favorise le guidage de la prothèse
- Disponible avec attaches distales et un contrôle de rotation pour tous les types de pin et les systèmes de verrouillage Streifeneder
- Disponible aussi sans connexion distale, mais avec un contrôle de rotation pour les technologies d'emboîture sous vide.

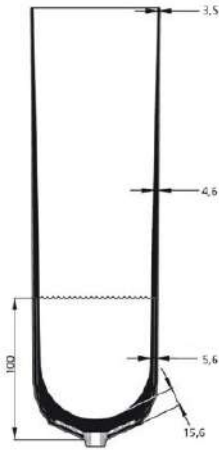

MATÉRIAU

- **Épaisseur de paroi 3 mm**, voir croquis
- Silicone de qualité médicale, particulièrement souple, avec additif d'aloë vera, antibactérien
- Environ 28 Shore 00
- Revêtement tricoté d'une seule pièce, résistant à l'abrasion, en polyamide / élasthanne
- Anti-rotation distale (cupule anti-rotation) en silicone
- **Couleur** : gris argenté



TAILLES DISPONIBLES	ÉPAISSEUR	MATRIX EXTERNE	DESCRIPTION	RÉFÉRENCES
18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	3 mm	10	AVEC ATTACHE DISTALE	N46L10-taille
18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45	3 mm	sans	SANS ATTACHE DISTALE	N46L20-taille

Exemple de commande : N46L10-18 = avec attache distale, taille 18. Fourni avec support de séchage

Dimensionnement : : mesurez la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisissez le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



SkinCareSil.soft (6 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone de 6 mm particulièrement souple avec un additif à l'aloë vera.

- Spécialement pour le soin des membres résiduels sensibles à la pression avec des maladies cutanées et/ou vasculaires
- Très bien adapté pour les utilisateurs peu actifs, en mise initiale ou pour les soins gériatriques
- Pour membres résiduels osseux avec peu de tissus mous

CARACTÉRISTIQUES

- En silicone particulièrement souple de 6 mm
- Propriétés soignantes pour la peau grâce à l'additif aloë vera contenu dans le silicone
- Confort et amortissement optimaux
- Tissu externe textile tricoté d'une seule pièce permettant de rouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Avec matrix externe tricoté de 10 cm, réduisant l'effet de pompage (soulèvement distal)
- Grande élasticité transversale - également dans la zone distale
- Ligne verticale tricotée de couleur à l'avant servant de repère pour faciliter et contrôler la bonne mise en place ou le retrait
- Le contrôle de rotation distale favorise le guidage de la prothèse
- Disponible avec attaches distales et un contrôle de rotation pour tous les types de pin et les systèmes de verrouillage Streifeneder
- Disponible aussi sans connexion distale, mais avec un contrôle de rotation pour les technologies d'emboîture sous vide.



MATÉRIAU

- **Épaisseur de paroi 6 mm**, voir croquis
- Silicone de qualité médicale, particulièrement souple, avec additif d'aloë vera, antibactérien
- Environ 28 Shore 00
- Revêtement tricoté d'une seule pièce, résistant à l'abrasion, en polyamide / élasthanne
- Anti-rotation distale (cupule anti-rotation) en silicone
- **Couleur** : gris argenté



TAILLES DISPONIBLES

18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45

ÉPAISSEUR

6 mm

MATRIX EXTERNE

10

DESCRIPTION

AVEC ATTACHE DISTALE

RÉFÉRENCES

N48L10-taille

18 / 20 / 21 / 22 / 23,5 / 25 / 26,5 / 28 / 30 / 32 / 34 / 36 / 38 / 40 / 42 / 45

6 mm

sans

SANS ATTACHE DISTALE

N48L20-taille

Exemple de commande : N48L10-18 = avec attache distale, taille 18. Fourni avec support de séchage

Dimensionnement : : mesurez la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisissez le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



AK-Control.Sil



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone trans-fémoral conçu en Control-Sil-Silicone de stabilité moyenne, avec attache distale.


- Niveau d'activité: 1 à 4
- Idéal pour les soins des amputations au-dessus du genou et pour les soins des amputations volumineuse sous le genou

CARACTÉRISTIQUES

- 2 mm d'épaisseur de paroi pour une expansion contrôlée dans la zone d'entrée de la prise
- Matrix extérieure pour réduire l'expansion longitudinale (expansion longitudinale inhibée)
- Revêtement textile fonctionnel particulièrement souple permettant d'enrouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Très bonne expansion radiale qui s'adapte aux changements de volume du membre résiduel
- Contrôle de la rotation pour améliorer le guidage de la prothèse
- Avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage Streifeneder
- Avec connexion distale compatible avec toutes les attaches distales et les systèmes de verrouillage Streifeneder a technologie de prise par le vide



Largeur bande textile 38 mm

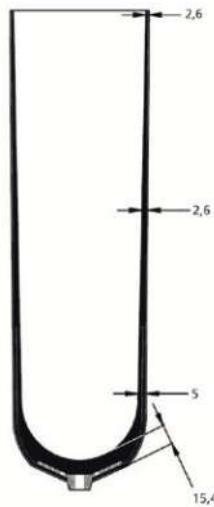

Longueur totale environ 370 mm

MATÉRIAU

- **Épaisseur de la paroi 2 mm** : voir croquis
- Control-Sil-Silicone, moyennement stable, antibactérien
- Env. 50 Shore 00
- Revêtement textile résistant à l'abrasion en polyamide/élasthanne
- Bande textile élastique en travers pour limiter la course longitudinale
- Avec contrôle de rotation PUR
- **Couleur** : gris argenté / noir
- **Garantie** : 6 mois

TAILLE	ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	N60L50-...



Exemple de commande: N60L5-25 = avec attache distale,taille 25. Fourni avec support de séchage.



La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.



AK-Control.Sil (Anti-rotation)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon en silicone trans-fémoral conçu en Control-Sil-Silicone de stabilité moyenne, avec connexion distale et bandes anti-rotation.

- Niveau d'activité: 1 à 4

- Idéal pour les soins des amputations au-dessus du genou et pour les soins des amputations volumineuse sous le genou

CARACTÉRISTIQUES


- 2 mm d'épaisseur de paroi pour une expansion contrôlée dans la zone d'entrée de la prise
- Matrix extérieure (bande cousue) pour réduire l'expansion longitudinale (expansion longitudinale inhibée)
- Des bandes anti-rotation sur la matrix extérieure empêchent la torsion entre le revêtement et l'emboîture de la prothèse
- Un revêtement textile fonctionnel particulièrement souple permettant d'enrouler facilement le manchon vers le haut ou vers le bas
- Très bonne expansion radiale qui s'adapte aux changements de volume du membre résiduel
- Contrôle de la rotation pour améliorer le guidage de la prothèse
- Avec connexion distale compatible avec toutes les attaches distales et les systèmes de verrouillage Streifeneder a technologie de prise par le vide

MATÉRIAU

- Épaisseur de la paroi 2 mm : voir croquis
- Control-Sil-Silicone, moyennement stable, antibactérien
- Env. 50 Shore 00
- Couverture textile anti-abrasion en polyamide/élasthanne
- Trois rangées de bandes de silicone sur la bande textile dans le sens vertical
- Avec contrôle de rotation PUR
- Couleur : gris argenté / noir
- Garantie : 6 mois



Largeur bande textile 38 mm + Anti-rotation

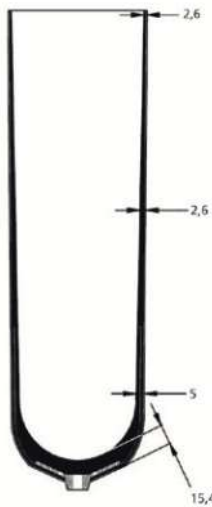

Longueur totale environ 370 mm



TAILLE	ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 45, 50, 55	2 mm	N60L10-...

Exemple de commande: N60L10-25 = avec attache distale, taille 25. Fourni avec support de séchage.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.





Control4Sil.basic



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon fémoral en silicone, de forme cylindrique, pour l'étanchéité au-dessus du genou.


- niveau d'activité (marche) : 1 à 4
- convient exclusivement à la technologie de l'emboîture à vide (VST)
- idéal pour les soins prothétiques des amputations au-dessus du genou et pour les soins des amputations volumineuses sous le genou.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 anneaux d'étanchéité en forme d'anneau assurent une adhésion sûre dans un système d'emboîtage sous vide
- Revêtement de surface glissant, pour un enfilage et un défilage plus faciles
- Forme cylindrique du revêtement
- Facile à nettoyer, convient donc parfaitement à une utilisation dans des zones humides
- La matrix interne sur toute la longueur empêche l'allongement et l'enroulement sur lui-même

MATÉRIAU

- Silicone résistant à la déchirure, environ 40 shore 00
- **Épaisseur de la paroi environ 2 mm**, voir croquis
- Matrix intérieure
- Revêtement glissant à l'extérieur
- Capuchon distal en silicone
- **Couleur** : translucide

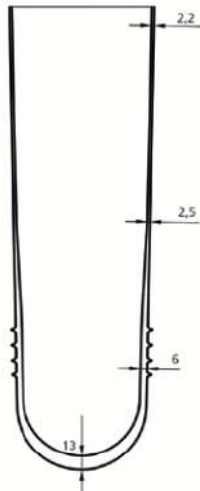

TAILLE	ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE
26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 45, 50	2 mm	N65S1-...

Exemple de commande: N60L1-25 = avec attache distale, taille 25. L'étendue de la livraison comprend le stand.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.





Control4Sil.conic



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchon fémoral en silicone, de forme conique, pour l'étanchéité au-dessus du genou.


- niveau d'activité (marche) : 1 à 4
- convient exclusivement à la technologie de l'emboîture à vide (VST)
- idéal pour les soins prothétiques des amputations au-dessus du genou et pour les soins des amputations volumineuses sous le genou.

CARACTÉRISTIQUES

- 4 anneaux d'étanchéité en forme d'anneau assurent une adhésion sûre dans un système d'emboîtage sous vide
- Revêtement de surface glissant, pour un enfilage et un défilage plus faciles
- Forme conique du revêtement
- Facile à nettoyer, convient donc parfaitement à une utilisation dans des zones humides
- La matrix interne sur toute la longueur empêche l'allongement et l'enroulement sur lui-même

MATÉRIAU

- Silicone résistant à la déchirure, environ 40 shore 00
- **Épaisseur de la paroi environ 2 mm**, voir croquis
- Matrix intérieure
- Revêtement glissant à l'extérieur
- Capuchon distal en silicone
- **Couleur** : translucide

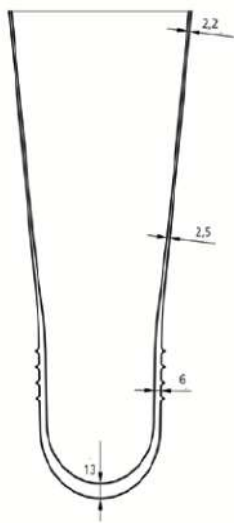

TAILLE	ÉPAISSEUR	RÉFÉRENCE
25, 26,5, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40	2 mm	N65S5-...

Exemple de commande: N60L1-25 = avec attache distale, taille 25. L'étendue de la livraison comprend le stand.

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et choisir le manchon de la même taille ou d'une taille inférieure.





ContexGel.basic (3 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, 3 mm, uniforme, en ContexGel souple


- Niveau d'activité: 1 à 3
- Pour les soins prothétiques des amputations Tibiales et Fémorales
- Convient pour remplacer les tissus mous au niveau de la zone résiduelle de la jambe
- Pour les moignons osseux, sensibles à la pression et difficiles à traiter

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une bonne absorption des chocs dans toute la zone résiduelle de la jambe**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume du moignon
- Le contrôle de la rotation distale permet le guidage de la prothèse (N20L10)
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

MATÉRIAU

- **Épaisseur : 3 mm** de forme conique uniforme
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- **Revêtement sans couture, résistant à l'abrasion, en polyamide/élasthanne**
- Article N21L10 avec contrôle de rotation PUR (capuchon)
- **Couleur** : anthracite mélangé
- **Garantie** : 6 mois

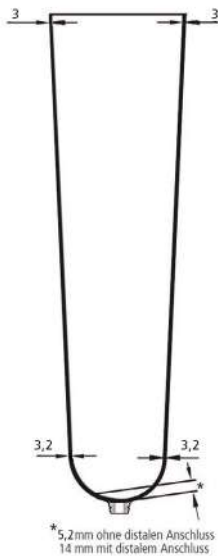

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N20L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N20L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N20L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N20L10-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N20L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N20L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N20L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N20L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N20L20-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N20L20-XXL



La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1).



ContexGel.basic (3 mm matrix)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, 3 mm, uniforme, en ContexGel souple avec matrix extérieure.


- Pour les soins prothétiques des amputations Tibiales et Fémorales
- Adapté au remplacement des tissus mous au niveau résiduel de la jambe
- Pour les moignons osseux, sensibles à la pression et difficiles à traiter

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une bonne absorption des chocs dans toute la zone résiduelle de la jambe**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- **Matrix externe distale intégrée réduisant l'allongement distal**
- Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume du moignon
- Le contrôle de la rotation distale permet le guidage de la prothèse (N25L10)
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

MATÉRIAU

- **Épaisseur : 3 mm** de forme conique uniforme
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- **Revêtement sans couture, résistant à l'abrasion, en polyamide/élasthanne**
- Article N25L10 avec contrôle de rotation PUR (cupule distale)
- **Couleur** : anthracite mélangé
- **Garantie** : 6 mois

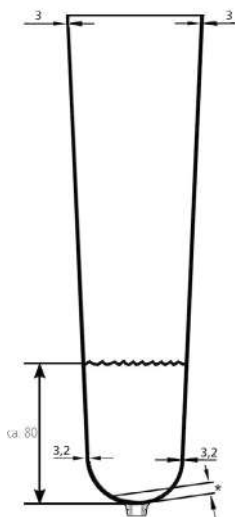

* 5,2 mm ohne distalen Anschluss
14 mm mit distalem Anschluss

Longueur totale environ 370 mm

TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N25L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N25L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N25L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N25L10-XXL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N25L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N25L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N25L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N25L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N25L20-XXL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N25L20-XXL



La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1).



ContexGel.soft (6 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, épaisseur de la paroi antérieure 6 mm, épaisseur de la paroi postérieure 3 mm, en ContexGel souple.

- Niveau d'activité: 1 à 3
- Pour les soins prothétiques des personnes amputées sous le genou
- Convient pour remplacer les tissus mous à l'avant du bord du tibia et à l'extrémité résiduelle de la jambe
- Pour les moignons osseux et difficiles de la partie inférieure de la jambe

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une très bonne absorption des chocs à l'avant de la surface résiduelle des jambes**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- Un matériau plus fin dans la zone distale arrière fait fléchir le genou afin de faciliter l'emboîtement des prothèses
- **Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume de la jambe résiduelle**
- **Le contrôle de la rotation distale permet de guider la prothèse de jambe**
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

MATÉRIAU

- **Épaisseur : 6 mm antérieur, 3 mm postérieur** forme conique
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- Couverture tricotée d'une seule pièce, résistante à l'abrasion, en polyamide/élasthanne
- Article N21L10 avec contrôle de rotation PUR (capuchon)
- **Couleur** : anthracite moucheté
- **Garantie** : 6 mois



Longueur totale environ 370 mm



TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N21L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N21L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N21L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N21L10-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N21L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N21L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N21L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N21L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N21L20-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N21L20-XXL

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1).



ContexGel.soft (6 mm matrix)




INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, épaisseur de la paroi antérieure 6 mm, épaisseur de la paroi postérieure 3 mm, en ContexGel souple avec matrice extérieure avec matrice extérieure.

- Niveau d'activité: 1 à 3
- Pour les soins prothétiques des amputations Tibiales
- Convient pour remplacer des tissus mous à l'avant du bord du tibia et à l'extrémité résiduelle de la jambe
- Pour les moignons osseux et difficiles de la partie inférieure de la jambe

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une très bonne absorption des chocs à l'avant de la surface résiduelle des jambes**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- Un matériau plus fin dans la zone distale arrière fait fléchir le genou afin de faciliter l'emboîtement des prothèses
- Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume de la jambe résiduelle
- Contrôle de la rotation distale permettant de guider la prothèse de jambe
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

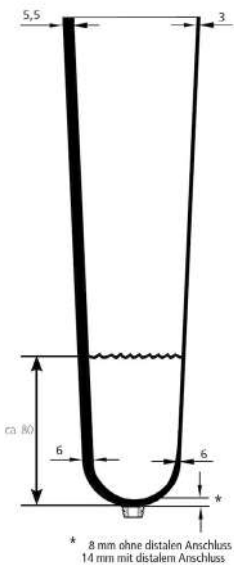

MATÉRIAU

- **Épaisseur : 6 mm antérieur, 3 mm postérieur** forme conique
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- Couverture tricotée d'une seule pièce, résistante à l'abrasion, en polyamide/élasthanne
- Article N26L10 avec contrôle de rotation PUR (capuchon)
- **Couleur** : anthracite mélangé
- **Garantie** : 6 mois



TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N26L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N26L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N26L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N26L10-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N26L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N26L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N26L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N26L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N26L20-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N26L20-XXL

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1).



ContexGel.soft+ (9 mm)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, épaisseur de la paroi antérieure 9 mm, épaisseur de la paroi postérieure 3 mm, en ContexGel souple.

- Niveau d'activité : 1 à 3
- Pour les soins prothétiques des amputations Tibiales
- Convient pour remplacer des tissus mous à l'avant du bord du tibia et à l'extrémité résiduelle de la jambe
- Pour les moignons osseux et difficiles de la partie inférieure de la jambe

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une très bonne absorption des chocs à l'avant de la surface résiduelle des jambes**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- Un matériau plus fin dans la zone distale arrière fait fléchir le genou afin de faciliter l'emboîtement des prothèses
- **Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume de la jambe résiduelle**
- **Le contrôle de la rotation distale permet de guider la prothèse de jambe**
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

MATÉRIAU

- **Épaisseur : antérieur 9 mm, postérieur 3 mm** forme conique
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- Couverture tricotée d'une seule pièce, résistante à l'abrasion, en polyamide/élasthanne
- Article N22L10 avec contrôle de rotation PUR (capuchon)
- **Couleur** : anthracite mélangé
- **Garantie** : 6 mois



* 9 mm ohne distalen Anschluss
15 mm mit distalem Anschluss

Longueur totale environ 370 mm



TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N22L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N22L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N22L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N22L10-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N22L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N22L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N22L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N22L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N22L20-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N22L20-XXL

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1).



ContexGel.soft+ (9 mm matrix)



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

ContexGel-Liner, épaisseur de la paroi antérieure 9 mm, épaisseur de la paroi postérieure 3 mm, en ContexGel souple avec matrix extérieure.


- Niveau d'activité: 1 à 3
- Pour les soins prothétiques des amputations Tibiale
- convient pour le remplacement des tissus mous au niveau du bord du tibia et de l'extrémité du moignon
- convient pour les moignons osseux, très sensibles à la pression ou difficiles à traiter

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **Un confort de port optimal et une très bonne absorption des chocs à l'avant de la surface résiduelle des jambes**
- Revêtement textile sans couture facilitant la mise en place du manchon
- Un matériau plus fin dans la zone distale arrière fait fléchir le genou afin de faciliter l'emboîtement des prothèses
- **Excellente élongation circulaire s'adaptant aux changements de volume de la jambe résiduelle**
- **Contrôle de la rotation distale permettant de guider la prothèse de jambe**
- Disponible avec connexion distale compatible avec tous les types d'attaches distales et les systèmes de verrouillage **Streifeneder**
- Disponible sans connexion distale pour la technologie de prise par le vide (VST)

MATÉRIAU

- **Épaisseur : antérieur 9 mm, postérieur 3 mm** forme conique
- **ContexGel doux avec huile hydratante, et traitement antibactérien SteriOne**
- Env. 25 - 30 Shore 00
- Couverture tricotée d'une seule pièce, résistante à l'abrasion, en polyamide/élasthanne
- Article N27L10 avec contrôle de rotation PUR (capuchon)
- **Couleur** : anthracite mélangé
- **Garantie** : 6 mois

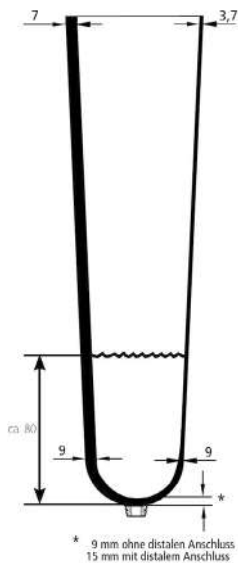

Longueur totale environ 370 mm



TAILLE	DISTALE	PROXIMALE	ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	avec	N27L10-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	avec	N27L10-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	avec	N27L10-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	avec	N27L10-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	avec	N27L10-XXL
S	16 - 23 cm	25 - 36 cm	sans	N27L20-S
M	19 - 30 cm	30 - 43 cm	sans	N27L20-M
L	24 - 34 cm	38 - 58 cm	sans	N27L20-L
XL	28 - 39 cm	41 - 63 cm	sans	N27L20-XL
XXL	32 - 44 cm	43 - 69 cm	sans	N27L20-XXL

La bonne taille : Mesurer la circonférence distale à environ 4 cm au-dessus de l'extrémité du moignon et sélectionner la taille du manchon dans la zone de la circonférence distale et proximale du moignon selon le tableau. Veuillez noter que les moignons transtibiaux avec Manchons ContexGel sans connexion distale nécessitent une genouillère ContexGel (article n° N30L1)..



Genouillères ContexGel

TT

L.P.P
7782425



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Genouillères ContexGel, uniforme de 3 mm, conique.

- Les genouillères ContexGel conviennent aux amputés tibiaux comme support de maintien du genou ou comme genouillère d'étencheité pour la technologie de prise par le vide (VST)
- Un guide supplémentaire pour le genou et la stabilisation des prothèses courtes.
- Les tailles plus petites sont aussi utilisées comme supports de maintien pour les prothèses de bras.

CARACTÉRISTIQUES

- Thermoplastique moulable à 60 °C
- **La zone satinée empêche les sensations de tension dans la zone de l'articulation du genou pour une adhérence optimale dans la zone distale et proximale**
- Un revêtement textile souple en tricot sans couture pour pouvoir facilement enrouler la genouillère du genou vers le haut ou vers le bas
- **Minimisation de l'allongement par la matrice externe dans les parties distale et proximale**
- **Une excellente expansion circulaire s'adapte à l'anatomie de la prise et de l'utilisateur**
- Recommandation de produit supplémentaire pour la technologie de prise par le vide (VST)



GARANTIE : 3 MOIS

MATÉRIAU

- **L'épaisseur** : 3 mm de forme conique uniforme
- **ContexGel doux à l'huile blanche médicale, antibactérien**
- Housse tricotée d'une seule pièce, résistante à l'abrasion, en polyamide / élasthanne
- Environ 25 - 30 Shore 00
- **Couleur** : anthracite mélangé N30L10 / sable N30L50
- **Garantie** : 3 mois

TAILLE	COULEUR			ANTHRACITE	SABLE
	DISTALE	PROXIMALE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	RÉFÉRENCES
S	15 - 23 cm	23 - 35 cm	37 cm	N30L10-S	N30L50-S
M	21 - 31 cm	29 - 44 cm	37 cm	N30L10-M	N30L50-M
L	28 - 43 cm	36 - 52 cm	38,5 cm	N30L10-L	N30L50-L
XL	34 - 48 cm	42 - 58 cm	38,5 cm	N30L10-XL	N30L50-XL
XXL	38 - 52 cm	43 - 64 cm	38,5 cm	N30L10-XXL	N30L50-XXL

La bonne taille : Les genouillères ContexGel sont disponibles en 6 tailles. Si possible, veuillez positionner la genouillère avec son milieu vers l'articulation du genou. Mesurez également la circonférence distale et la circonférence proximale de la cuisse (environ 15 cm au-dessus du centre de l'articulation du genou). Cela permettra de déterminer la taille optimale.



ContexGel.protoc

TT



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Manchette de protection pour genouillère ContexGel

- Manchette de protection pour les emboîtures à bords tranchants

CARACTÉRISTIQUES

- Une manchette de protection extensible empêche la déchirure prématurée des genouillères ContexGel
- La manchette de protection est portée sous la genouillère ContexGel
- La face interne distale est équipée d'un bord en silicone, qui l'empêche de glisser au niveau de l'emboîture
- Adhésif supplémentaire non nécessaire

MATÉRIAU

- Tissu fonctionnel durable et extensible, en polyuréthane/polyamide/élasthanne
- **Couleur** : noir
- **Garantie** : 6 mois

TAILLE	CÔTÉ	ContexGel.protoc	LONGUEUR	RÉFÉRENCES
S	universel	taille S	19 cm	N3S50-S
M	universel	taille M	19 cm	N3S50-M
L	universel	taille L	22 cm	N3S50-L
XL	universel	taille XL + XXL	22 cm	N3S50-XL



AK-Suspender

TF



La livraison ne comprend pas les composants prothétiques

INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Ceinture de soutien pour prothèse fémorale

- Fixe une prothèse au niveau du bassin de l'utilisateur et empêche la prothèse de glisser du membre résiduel
- Le AK-Suspender est utilisé pour soutenir les prises de suspension au dessus du genou (Fémorale) si un vide suffisant ne peut être obtenu.

CARACTÉRISTIQUES

- Facilite la mise en place de la prothèse et améliore le guidage pendant le port de la prothèse Fémorale sans valve en caoutchouc ni système de revêtement
- Le néoprène élastique et antidérapant à l'intérieur de la jambe adhère à l'emboîture
- Un matériau stable, renforcé et élastique transversalement dans la zone du bassin / de la hanche s'adapte de manière optimale à la forme du corps
- Des possibilités d'ajustement individuel grâce à deux fermetures frontales à crochets et à boucles

MATÉRIAU

- Section des jambes : 100 % néoprène (caoutchouc cellulaire), doublure extérieure en textile : 100 % polyamide (PA)
- Section pelvienne : 46 % polyamide (PA), 30 % viscose (CV), 24 % élasthanne (EL)
- **Couleur** : argent/anthracite
- Lavable en machine à 30 °C

TAILLE	TOUR DE HANCHE	CIRCONFÉRENCE	CÔTÉ	RÉFÉRENCES
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	droit	N300A1-RS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	droit	N300A1-RM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	droit	N300A1-RL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	droit	N300A1-RXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	droit	N300A1-RXXL
S	60 - 74 cm	36 - 40 cm	gauche	N300A1-LS
M	66 - 80 cm	40 - 44 cm	gauche	N300A1-LM
L	76 - 90 cm	44 - 48 cm	gauche	N300A1-LL
XL	86 - 100 cm	48 - 52 cm	gauche	N300A1-LXL
XXL	96 - 110 cm	52 - 56 cm	gauche	N300A1-LXXL



BK-Suspender

TT



La livraison ne comprend pas les composants prothétiques

INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Aide au maintien pour les prothèses tibiales

- Fixation supplémentaire de la prothèse tibiale à la jambe ; empêche le glissement de la prothèse du membre résiduel
- Soutient l'orientation de la prothèse
- Soutient et soulage la capsule de l'articulation du genou lorsqu'on porte une prothèse courte

CARACTÉRISTIQUES

- Grande élasticité circulaire, presque aucune élasticité dans la zone verticale
- Forme anatomique, respect de la flexion

MATÉRIAU

- 75 % PA polyamide
- 25 % EL élasthanne (sans latex)
- **Couleur** : argent/sable
- **Packaging** = vendu par 2 unités

TAILLE	COULEUR			ANTHRACITE	SABLE
	DISTALE	PROXIMALE	LONGUEUR	RÉFÉRENCES	RÉFÉRENCES
S	26 - 30 cm	34 - 38 cm	35 cm	N23A1-S	N24A1-S
M	29 - 33 cm	38 - 42 cm	35 cm	N23A1-M	N24A1-M
L	32 - 36 cm	42 - 46 cm	35 cm	N23A1-L	N24A1-L
XL	35 - 39 cm	46 - 50 cm	35 cm	N23A1-XL	N24A1-XL
XXL	38 - 52 cm	43 - 64 cm	38,5 cm	N30L10-XXL	N30L50-XXL

Pour côté droit et gauche.



DEZIN (enfile prothèse)

TF



INDICATIONS DE PRESCRIPTION

Aide pour les prothèses fémorales

- L'octroi d'une aide pour les prothèses fémorales




CARACTÉRISTIQUES


- La surface de glissement du matériau de l'enfile prothèse simplifie la mise en place de celle-ci
- Une aide au glissement longue et raide qui simplifie l'application par l'ouverture de la valve de l'emboîture de la prothèse
- Grâce à la grande languette de préhension, le fait de tirer par l'ouverture de la valve permet de réaliser des économies d'énergie
- Des coutures de couleur contrastante pour l'identification des différentes tailles existantes.

MATÉRIAU

- Tissu : 100 % polyamide PA
- Revêtement : polyuréthane 100 % PUR
- **Garantie** : 3 mois PU = 1 pc. avec sac de rangement

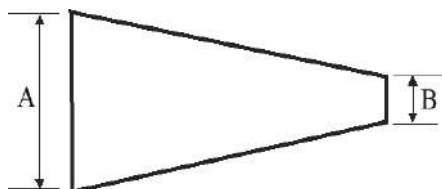

CIRCONFÉRENCE PROXIMALE DE MOIGNON (A)	CIRCONFÉRENCE DISTALE DE MOIGNON (B)	LONGUEUR	COULEUR	RÉFÉRENCES
40 cm	24 cm	43 cm	jaune	N17A1-XS
44 cm	26 cm	50 cm	rouge	N17A1-S
56 cm	28 cm	50 cm	bleu foncé	N17A1-M
68 cm	30 cm	50 cm	vert	N17A1-L
76 cm	36 cm	52 cm	bleu clair	N17A1-XL
88 cm	38 cm	60 cm	orange	N17A1-XXL

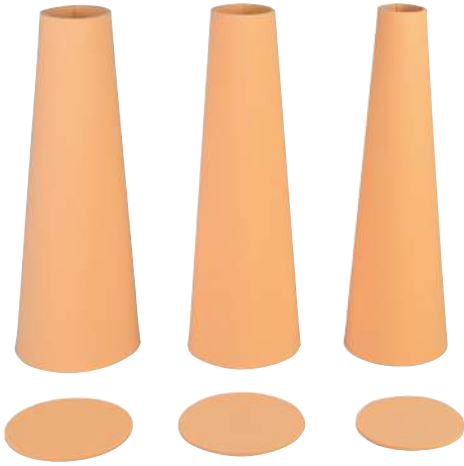

STREIFYCONE POUR MANCHON SOUPLE

- Cônes préfabriqués avec embout distal pour la production de manchons souples en un temps record.

CARACTÉRISTIQUES

- Le matériau Streifyfoam (polyéthylène souple expansé) est idéalement moulable en thermoplastique à 130 °C
- Ne rétrécit pas, possède une excellente force de rétablissement et se nettoie facilement à l'eau savonneuse neutre.

Matériel

- Mousse à cellules fermées et donc très hygiénique et non irritante pour la peau
- Épaisseur: 5mm
- ShoreA35-40
- Hauteur : 425 mm pour toutes les tailles

CIRC. DISTALE	CIRC. PROXIMALE	Ø DIAMÈTRE DE LA CUPULE DISTALE	TAILLE	RÉFÉRENCES
190 mm	390 mm	116 mm	S	N6S1-S
230 mm	420 mm	136 mm	M	N6S1-M
260 mm	470 mm	136 mm	L	N6S1-L

Chauffer à plat dans le four à infrarouge ou debout dans une armoire chauffante à 130 °C pendant environ 10 à 15 minutes, puis la tirer sur le moulage . Pour coller l'embout distal, il est préférable d'utiliser notre colle contact forte (N118P13).



CRÈME DE SOIN PC30V

- Crème de soin pour application externe, pour les porteurs de prothèses, ainsi que d'autres appareils et accessoires orthopédiques
- Évite les zones de pression et de frottement
- Conditionne et renforce également la peau
- Applicable pour la prophylaxie du décubitus
- Sans substances irritantes pour la peau

VOLUME	RÉFÉRENCES
100 ml	N10H1-100
250 ml	N10H1-250



SOINS DE LA PEAU - LOTION NETTOYANTE

- Nettoie la peau, les prothèses, les orthèses et les manchons en douceur prévient les irritations cutanées
- PH neutre
- Empêche les odeurs corporelles

VOLUME	RÉFÉRENCE
250 ml	N10H2



SOINS DE LA PEAU - CRÈME DE PROTECTION POUR LA PEAU

- Nettoie la peau, les prothèses, les orthèses et les manchons en douceur prévient les irritations cutanées
- PH neutre
- mpêche les odeurs corporelles

CARACTÉRISTIQUES

- Développe un film protecteur efficace
- Protège le film d'acide physiologique
- Utilisation économique PU=1tube

Matériel

- Silicoderm F, conçu à base d'huile de silicone
- La protection de la peau, notamment avant et après les travaux de moulage

VOLUME	RÉFÉRENCE
35 ml	N10H3



SOINS DE LA PEAU - LOTION HYDRATANTE

- Conditionne et régénère les peaux sèches et stressées
- Protège contre la pression et les frottements - apaise les irritations de la peau
- Réduit la sueur et les odeurs

VOLUME	RÉFÉRENCE
250 ml	N10H4



SOINS DE LA PEAU - SPRAY POUR MANCHON

- Spray pour les manchons sans revêtement textile
- Le revêtement en silicone reçoit une couche coulissante avec le spray
- Pour faciliter la mise en place et l'enlèvement
- Une adhérence optimale par vaporisation rapide



VOLUME	RÉFÉRENCES
200 ml	N10H5
Flacon de recharge pour spray de soin de la peau 1000 ml	N10H5-1



CISEAUX DE COUPE À VAGUES

- Surface de coupe avec bord dentelé (1 vague de 2 cm)
- Pour la découpe et la mise en forme des gels de silicone et des ContextGel.
- Empêche la déchirure des bords coupants des doublures causée par l'étirement
- Améliore la répartition des forces de cisaillement circulaires sur la peau résiduelle du membre, qui réduit les irritations de la peau

LONGUEUR	RÉFÉRENCE
240 mm	N166P36



GAINES STREIFYDERM

2mm Gel polymère

- Pour prendre soins de la partie inférieure de la jambe
- Gaine constituée de nylon texturé et revêtue d'un gel polymère de 2 mm

LONGUEUR DU GEL / TAILLE	LONGUEUR DE LA GAINES	CIRC. DISTALE	CIRC. PROXIMALE	RÉFÉRENCES
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	N26A10-1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	N26A10-2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A10-3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A10-4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A10-5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A10-6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	N26A10-7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	N26A10-8



GAINES STREIFYDERM

3mm Gel polymère

- Pour prendre soins de la partie inférieure de la jambe
- Gaine constituée de nylon texturé et revêtue d'un gel polymère de 3 mm

LONGUEUR DU GEL / TAILLE	LONGUEUR DE LA GAINES	CIRC. DISTALE	CIRC. PROXIMALE	RÉFÉRENCES
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	N26A20-1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	N26A20-2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A20-3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A20-4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A20-5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A20-6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	N26A20-7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	N26A20-8



GAINES STREIFYDERM

2 textures de nylon différentes et 2mm Gel polymère

- Pour prendre soins de la partie inférieure de la jambe
- Gaine constituée de 2 textures de nylon avec 2 mm de gel polymère entre les deux.

LONGUEUR DU GEL / TAILLE	LONGUEUR DE LA GAINES	CIRC. DISTALE	CIRC. PROXIMALE	RÉFÉRENCES
20 cm / 1	25 - 34 cm	17 - 24 cm	17 - 26 cm	N26A30-1
25 cm / 2	38 - 44 cm	18 - 28 cm	18 - 32 cm	N26A30-2
25 cm / 3	38 - 44 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A30-3
33 cm / 4	43 - 49 cm	20 - 34 cm	20 - 38 cm	N26A30-4
25 cm / 5	43 - 49 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A30-5
33 cm / 6	46 - 54 cm	23 - 37 cm	23 - 43 cm	N26A30-6
33 cm / 7	46 - 54 cm	28 - 42 cm	28 - 49 cm	N26A30-7
33 cm / 8	46 - 54 cm	31 - 50 cm	31 - 56 cm	N26A30-8

BAS DE COMPRESSION TIBIALE



Bas de compression tibiale avec bordure en silicone, antibactérienne

- La thérapie de compression : la classe de compression est déterminée par le médecin responsable. La pression de compression standard pour la classe de compression 1 (légère) est de 18 - 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) ; pour la classe de compression 2 (moyenne), elle est de 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

INDICATION


- Pour la réduction de l'œdème post-chirurgical après une amputation tibiale
- Pour la préparation et le plâtrage du membre résiduel pour la prothèse
- Pour la prévention des œdèmes après le retrait de la prothèse
- Maladie occlusive des artères périphériques (PAOD)
- Thrombophlébite aiguë
- Insuffisance cardiaque décompensée

CONTRE-INDICATION

- Blessures ouvertes
- Oedèmes non réductibles
- Les dermatites de stase (dermatitis varicosa)

Matériel

- Tissu à mailles circulaires, antibactérien
- 78 % polyamide
- 22 % d'élasthanne
- Avec poignée en silicone

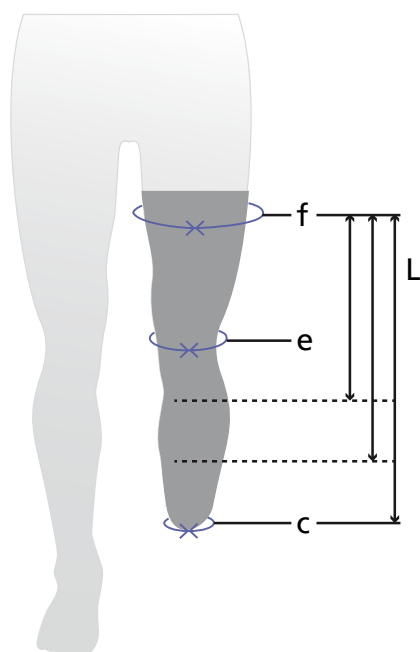

TAILLE	CIRC.F	CIRC.E	CIRC.C	LONGUEUR L
XS	41 cm	31 cm	29 cm	30, 38, 46 cm
S	44 cm	34 cm	32 cm	30, 38, 46 cm
M	47 cm	37 cm	35 cm	30, 38, 46 cm
L	50 cm	40 cm	38 cm	30, 38, 46 cm
XL	53 cm	43 cm	41 cm	30, 38, 46 cm
XXL	56 cm	46 cm	44 cm	30, 38, 46 cm

Classe de compression 1 : N452A1 + taille + longueur / Classe de compression 2 : N452A2 + taille + longueur

Exemple de commande : N452A1-XS30 = classe de compression 1, taille XS, longueur 30 cm.



Pour la documentation du volume, utilisez le tableau figurant dans le manuel d'instructions.





BAS DE COMPRESSION FÉMORALE



Avec fixation à la hanche, antibactérienne

- La thérapie de compression : la classe de compression respective est déterminée par le médecin responsable. La pression de compression standard pour la classe de compression 1 (légère) est de 18 - 21 mm Hg, (2,4 - 2,8 hPa) ; pour la classe de compression 2 (moyenne), elle est de 23 - 32 mm Hg, (3,1 - 4,3 hPa)

INDICATION

- Pour la réduction de l'œdème post-chirurgical après une amputation au-dessus du genou
- Pour la préparation et le plâtrage du membre résiduel pour la prothèse
- Pour la prévention des œdèmes après le retrait de la prothèse

CONTRE-INDICATION


- Blessures ouvertes
- Oedèmes non réductibles
- Les dermatites de stase (dermatitis

varicosa)

- Maladie occlusive des artères périphériques (PAOD)
- Thrombophlébite aiguë
- Insuffisance cardiaque décompensée

Matériel

- Tissu à mailles circulaires, antibactérien
- 78 % polyamide
- 22 % d'élasthanne
- Avec fixation à la hanche

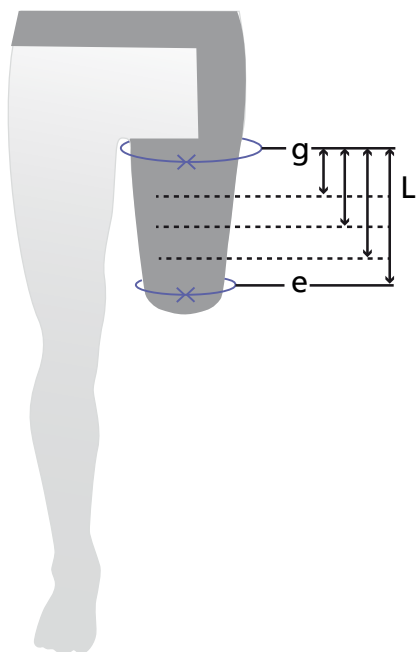

TAILLE	CIRC.G	CIRC.E	LONGUEUR L
XS	44 cm	31 cm	20, 25, 30, 35 cm
S	48 cm	34 cm	20, 25, 30, 35 cm
M	52 cm	37 cm	20, 25, 30, 35 cm
L	56 cm	40 cm	20, 25, 30, 35 cm
XL	60 cm	43 cm	20, 25, 30, 35 cm
XXL	64 cm	46 cm	20, 25, 30, 35 cm

Classe de compression 1 : N451A1 + taille + longueur / Classe de compression 2 : N451A2 + taille + longueur

Exemple de commande : N451A1-XS20 = classe de compression 1, taille XS, longueur 20 cm.



Pour la documentation du volume, utilisez le tableau figurant dans le manuel d'instructions.





BONNET TERRYCLOTH EN TISSU ÉPONGE POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX

Qualité épaisse, forme droite

- Très efficace pour égaliser les différents volumes, grâce à un intérieur volumineux avec des boucles en éponge
- Référence N25A10 avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale, à porter sur n'importe quel manchon
- Référence N25A11 sans ouverture, peut être porté directement sur la peau ou par-dessus une gaine




CARACTÉRISTIQUES

- Un port très confortable grâce à une forte teneur en coton
- Les boucles en tissu éponge à l'intérieur offrent un excellent effet d'amortissement, de plus ce type de matière peut stocker d'abondantes quantités d'humidité
- Technique de tricotage très extensible et pourtant dimensionnellement stable

Matériel

- 85 % (CO) de coton, 15 % (PA) de soie polyamide texturée (froissée)
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C

Dimension sketch:

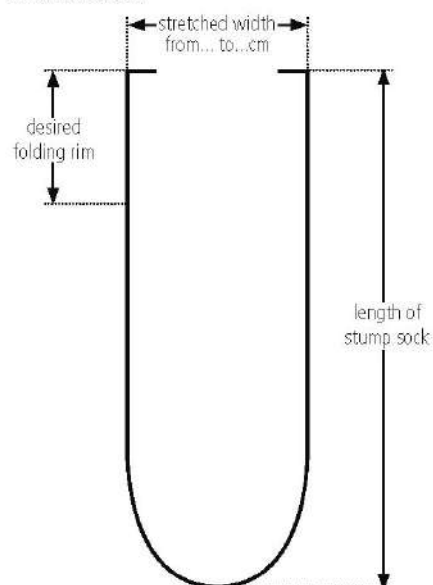

LONGUEUR EN CM	COULEUR	RÉFÉRENCES AVEC TROU POUR ATTACHE DISTALE	RÉFÉRENCES SANS TROU
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	bleu	N25A10-..B	N25A11-..B
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	pêche	N25A10-..H	N25A11-..H
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	noir	N25A10-..S	N25A11-..S
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	turquoise	N25A10-..T	N25A11-..T
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	blanc	N25A10-..W	N25A11-..W

Exemple de commande : N25A11-20B = sans trou, longueur 20 cm, couleur bleu. Disponible en vert, jaune, violet ou rouge sur demande.

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à la longueur du bas. La taille est déterminée par la longueur de la chaussette uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur de la chaussette devient plus courte en raison de l'étirement. La chaussette s'étire d'environ 10 cm à 20 cm.





BONNET TERRYCLOTH EN TISSU ÉPONGE POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Qualité épaisse, forme droite, contient de la laine


- Très efficace pour égaliser des disparités de volume en raison de la fibre froissée
- Référence N25A12 avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale, à porter sur n'importe quel manchon
- Référence N25A13 sans ouverture, peut être porté directement sur la peau ou par-dessus une gaine, par exemple : la référence d'article N25A50

CARACTÉRISTIQUES

- Les boucles en tissu éponge à l'intérieur offrent un excellent effet d'amortissement, de plus ce type de matière peut stocker d'abondantes quantités d'humidité
- Port très confortable et effet de réchauffement dû à la teneur en laine
- Pendant le port, la forme du bas s'adapte à la forme individuelle de la membre résiduel

Matériel

- 50 % (WO) laine
- 25 % PA (acryl)
- 10 % PA (polyamide)
- 15 % (PA) soie polyamide texturée (froissée)
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc cassé

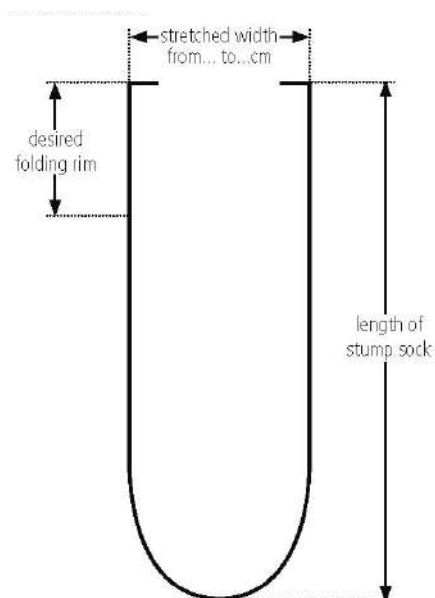

LONGUEUR EN CM	TYPE	RÉFÉRENCES
20, 35, 40, 45, 55, 65	avec trou pour attache distale	N25A12-..
20, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65	sans trou	N25A13-..

Exemple de commande : N25A12-25 = avec trou pour broche, longueur 25 cm.

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 10 cm à 20 cm.





BONNET TERRYCLOTH EN TISSU ÉPONGE POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Qualité extra-épaisse, forme droite, à teneur en lycra

- Très efficace pour égaliser les différents volumes, grâce à un intérieur constitué de boucles en éponge
- Ce type sans ouverture peut être porté sur n'importe quel manchon ou directement sur la peau
- Une gaine supplémentaire, peut être porté directement sur la peau afin de la garder sèche
- Léger effet de compression, dû à la teneur en Lycra



CARACTÉRISTIQUES


- Extrêmement extensible (plus du double de la largeur non étirée) en raison de sa teneur en lycra
- Très grande stabilité dimensionnelle grâce à la teneur en lycra, c'est-à-dire que le matériau se resserre toujours à sa forme d'origine
- Un port très confortable grâce à une forte teneur en coton
- Les boucles en tissu éponge à

l'intérieur offrent un excellent effet d'amortissement, de plus ce type de matière peut stocker d'abondantes quantités d'humidité

Matériel

- 95 % (CO) coton
- 5 % (EL) élasthanne (Lycra)
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur :** blanc

Dimension sketch:

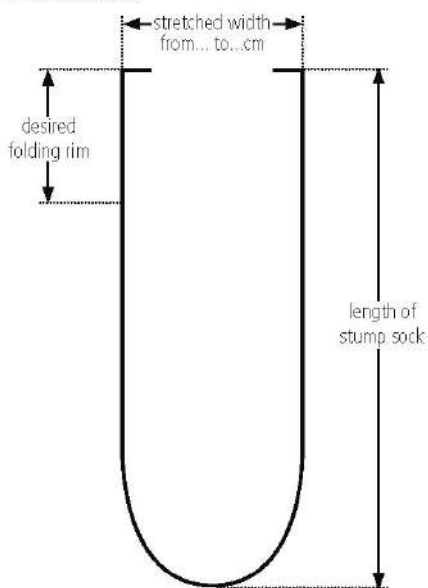

LONGUEUR EN CM	TYPE	RÉFÉRENCE
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 75	avec trou pour attache distale	N25A14-..

Exemple de commande : N25A14-20 = longueur 20 cm.

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 7,5 cm à 19 cm





BONNET TERRY CLOTH EN COTON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX

Mince, de qualité lisse, de forme droite, à forte teneur en élasthanne

- Référence N25A20 avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale, à porter sur n'importe quel manchon
- Référence N25A21 sans ouverture, peut être porté directement sur la peau
- Efficace pour égaliser les différents volumes
- Léger effet de compression, dû à une forte teneur en élasthanne




CARACTÉRISTIQUES

- Très grande capacité d'étirement et stabilité de la forme grâce à une forte teneur en élasthanne, c'est-à-dire que le matériau se resserre toujours à sa forme initiale
- Port très confortable et tolérance cutanée grâce à une forte teneur en coton

Matériel

- 85 % (CO) coton
- 15 % (EL) élasthanne
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

Dimension sketch:

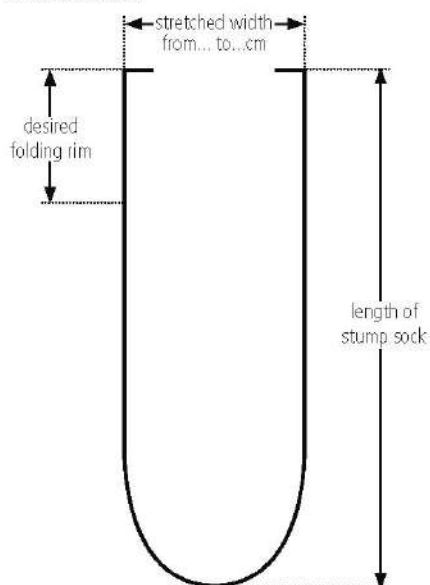

LONGUEUR EN CM	TYPE	RÉFÉRENCES
20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60	avec trou pour attache distale	N25A20-..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 75	sans trou	N25A21-..

Exemple de commande : N25A20-20 = avec trou, longueur 20 cm.

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 8 cm à 16 cm.





BONNET EN COTON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX

Mince, de qualité lisse, de forme droite, avec une teneur en élasthanne

- Référence N25A23 avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale, à porter sur n'importe quel manchon
- Référence N25A24 sans ouverture, peut être porté directement sur la peau
- Efficace pour égaliser les différents volumes
- Effet de compression de la lumière, dû à la teneur en élasthanne



CARACTÉRISTIQUES


- Très grande capacité d'étirement et stabilité de la forme grâce à une forte teneur en élasthanne, c'est-à-dire que le matériau se resserre toujours à sa forme initiale
- Port très confortable et tolérance cutanée grâce à une forte teneur en coton

- Brassard plat à une seule couche

Matériel

- 95 % (CO) coton
- 5 % (EL) élasthanne
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc cassé

Dimension sketch:

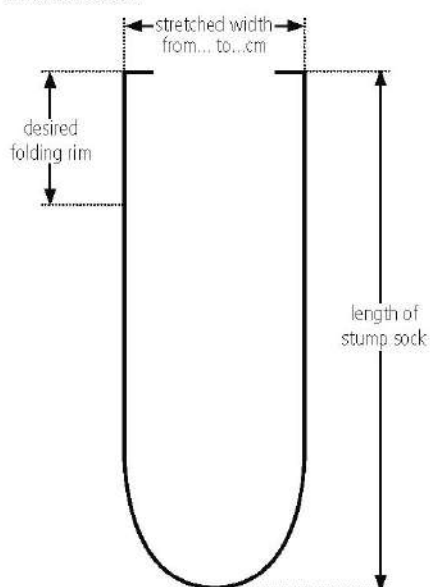

LONGUEUR EN CM

20, 25, 30, 35, 40, 45, 55,

TYPE

avec trou pour attache distale

RÉFÉRENCES

N25A23-..

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60,

sans trou

N25A24-..

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 8 cm à 16 cm.





BONNET EN NYLON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Très finement tissé, de qualité fine, de forme droite

- À porter sur le manchon pour le protéger efficacement

CARACTÉRISTIQUES

- Avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour l'attache distale
- La couture travaillée du revers marque l'intérieur ; le côté lisse de la couture doit être orienté vers l'extérieur

Matériel

- 100 % PA (nylon), tissu à mailles, similaire aux collants opaques
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

LONGUEUR EN CM

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50,55

TYPE


avec trou d'épingle vulcanisé en caoutchouc

RÉFÉRENCE

N25A31-..

Exemple de commande : N25A31-25 = avec trou vulcanisé pour attache distale en caoutchouc, longueur 25 cm.

Dimension sketch:

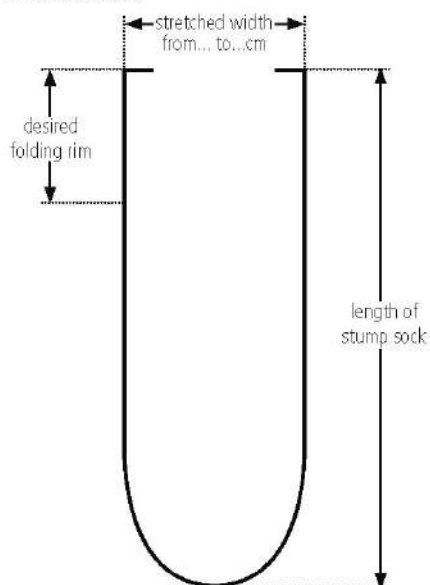

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 11 cm à 20 cm.





BONNET EN NYLON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Qualité fine, tricotée avec précision, forme droite, grande ouverture pour l'attache distale
- À porter sur le manchon pour le protéger efficacement

CARACTÉRISTIQUES

- L'ouverture, d'environ 4 cm de diamètre, est formée par une manchette tricotée (par exemple adaptée à un système de cordons KISS®)
- La couture spécifique du revers marque l'intérieur ; le côté lisse doit être tourné vers l'extérieur

Matériel

- 100 % PA (nylon), tissu à mailles ouvertes, similaire aux collants opaques
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

LONGUEUR EN CM

25, 35, 45


TYPE

avec trou tricoté pour attache distale

RÉFÉRENCE

N20A61-..

Dimension sketch:

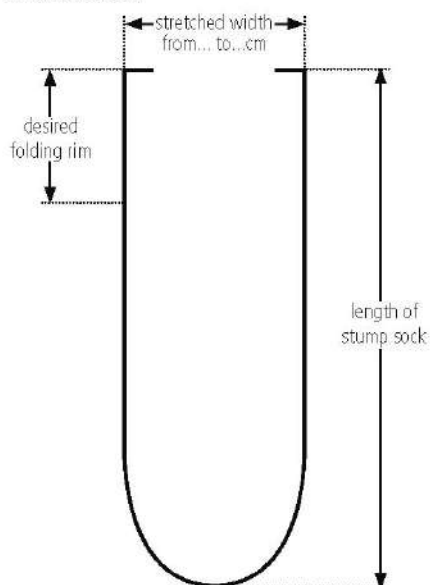

Exemple de commande : N20A61-25 = longueur 25 cm.

Si l'on souhaite un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bas. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement, il s'étire d'environ 10 cm à 20 cm.





BONNET TERRYCLOTH EN TISSU ÉPONGE POUR LES AMPUTÉS FÉMORAUX

Qualité épaisse, forme conique

- Très efficace pour égaliser les différents volumes, grâce à un intérieur volumineux avec des boucles en éponge
- Référence N25A15 avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale, à porter sur n'importe quel manchon
- Référence N25A16 sans ouverture, peut être porté directement sur la peau ou par-dessus une gaine



CARACTÉRISTIQUES


- Forme conique, avec une couture latérale plate
- Un port très confortable grâce à une forte teneur en coton
- Les boucles en tissu éponge à l'intérieur offrent un excellent effet d'amortissement, de plus ce type de matière peut stocker d'abondantes quantités d'humidité

- Technique de tricotage très extensible et pourtant dimensionnellement stable

Matériel

- 85 % (CO) de coton, 15 % (PA) de soie polyamide texturée (froissée)
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

Dimension sketch:

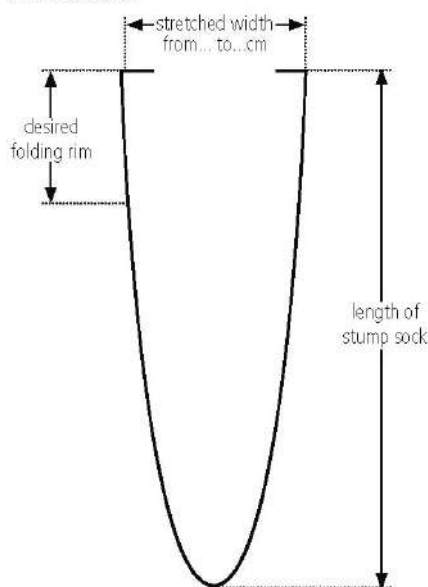

LONGUEUR EN CM	TYPE	RÉFÉRENCES
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	avec trou pour attache distale	N25A15-..
20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60	sans trou	N25A16-..

Exemple de commande : N25A15-20 = avec trou, longueur 20 cm.

Si l'on désire un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bonnet. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement.

Le bonnet s'étire d'environ 16 cm à 27 cm.





BONNET EN COTON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Mince, de qualité lisse, de forme conique, avec une teneur en élasthanne

- Avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale
- À porter sur n'importe quelle manchon et efficace pour égaliser les différents volumes

CARACTÉRISTIQUES

- Extrêmement extensible et indéformable grâce à la teneur en élasthanne, c'est-à-dire que le matériau se resserre toujours à sa forme d'origine
- Port très confortable et tolérance cutanée grâce à une forte teneur en coton

- Revers plat à une seule couche
- De forme conique, avec un joint latéral plat de couverture

Matériel

- 95 % (CO) coton, 5 % (EL) élasthanne
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

LONGUEUR EN CM

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55


TYPE

avec trou pour attache distale

RÉFÉRENCE

N25A25-..

Dimension sketch:

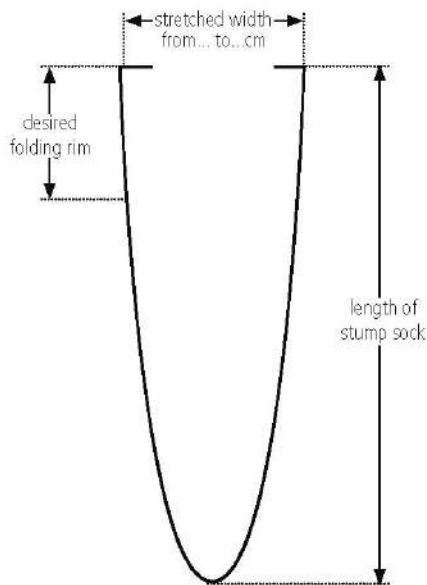

Exemple de commande : N25A25-25 = longueur 25 cm.

Si l'on désire un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bonnet. La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement.

Le bonnet s'étire d'environ 14 cm à 28 cm.





BONNET EN NYLON POUR LES AMPUTÉS TIBIAUX



Très finement tissé, de qualité fine, de forme conique

- Avec ouverture en caoutchouc vulcanisé pour attache distale
- À porter sur le manchon pour le protéger efficacement

CARACTÉRISTIQUES

- La couture spécifique du revers marque l'intérieur; le côté lisse doit être tourné vers l'extérieur
- Forme conique, donc avec couture latérale plate

Matériel

- 100 % PA (nylon), tissu à mailles, similaire aux collants opaques
- Lavable en machine jusqu'à 60 °C
- **Couleur** : blanc

LONGUEUR EN CM

25, 30, 35, 40, 45, 50,55

TYPE


avec trou pour broche

RÉFÉRENCE

N25A35-..

Exemple de commande : N25A35-25 = longueur 25 cm.

Dimension sketch:

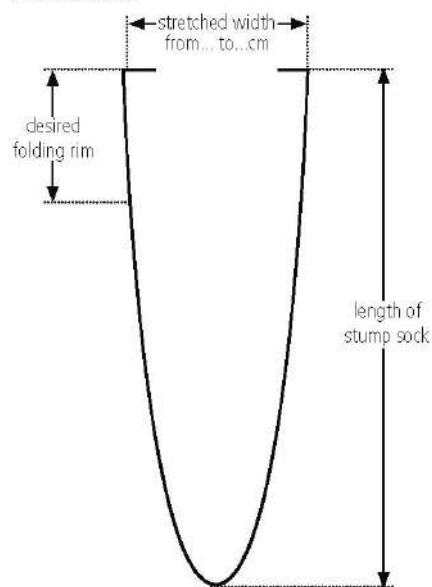

Si l'on désire un revers, il faut ajouter sa longueur à celle du bonnet.

La taille est déterminée par la longueur du bonnet uniquement. Pour des circonférences plus importantes du membre résiduel, la longueur du bonnet devient plus courte en raison de l'étirement.

Le bonnet s'étire d'environ 19 cm à 32 cm.

EXPLICATION DES SYMBOLES

Symboles d'entretien textile



Lavage à la main



30 °C lavage normal



40 °C lavage normal



60 °C lavage normal



Ne pas repasser



Ne pas javelliser



Pas de nettoyage à sec



Ne pas sécher en machine



Désinfection par pulvérisation

Symboles de danger



Flamme



Point d'exclamation

A

B

OKO

OKO SOLUTION

Rousset Parc II, 157 avenue Gaston Imbert - 13790 ROUSSET
Tél : 04 88 19 60 10 | Fax : 04 42 29 50 43 | commandes@okosolution.com
www.okosolution.fr



A4715