

SYNERGY X3

de **ortotek**



Split Toe

• Excellent Confort en Terrain Inégal



Variable Stiffness

• X3 = Cadence Variable Homogène



Multi Axial

• Confort Multi-Axial



Vertical Shock

• Absorption des Chocs Verticaux



Sport Activity

• Conçu pour les Activités Sportives



L.P.P.R.

◀ **2713750**

OKO SOLUTION Distributeur exclusif des Pieds Ortotek pour la France & les DROM-COM

Pied SYNERGY X3

1 2 3 4 



Split Toe



Variable Stiffness



Multi Axial



Vertical Shock



Sport Activity

• **Excellent Confort en Terrain Inégal**

• **X3 = Cadence Variable Homogène**

• **Confort Multi-Axial**

• **Absorption des Chocs Verticaux**

• **Conçu pour les Activités Sportives**


Caractéristiques :

- Une marche naturelle grâce à la longueur totale du pied, du talon aux orteils, et à sa conception sans vis.
- La conception à 3 lames carbone permet une absorption des chocs verticaux.
- La conception X3 qui offre une progressivité de la restitution d'énergie.
- Les orteils séparés permettent de marcher confortablement en terrains accidentés.
- Lames en carbone améliorés.
- L'utilisateur peut pratiquer des sports de loisirs.
- Pied Aqua compatible (Pyramide Titane)

Pied SYNERGY X3



SYNERGY X3	
Référence	ORT-SYX3- MXX
Niveau d'Activité	K3,K4
Poids Maximum du patient	147 kg
Tailles disponibles	22-29 cm
Hauteur de construction	22-25 cm=155 mm 26-29 cm=165 mm
Esthétique (côté)	Droite / Gauche = Y
Couleur de l'esthétique	Caucasian / Brun

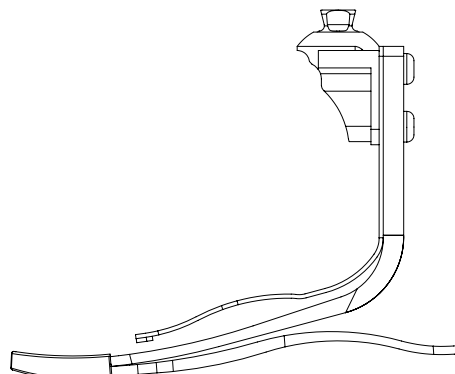

Comment créer sa référence : ORT-SYX3-**MXX**

Patient de 75 kg Impact MOYEN en Taille 27 Gauche couleur CAUCASIAN

Pour le pied : ORT-SYX3-**527**

Pour l'esthétique : ORT-KK-**27L-CAUC**

Comment déterminer son Module ?			
Poids du patient	Niveau d'impact		
	Faible	Moyen	Fort
45-52	1	1	2
53-59	1	2	3
60-68	2	3	4
69-77	3	4	5
78-88	4	5	6
89-100	5	6	7
101-116	6	7	8
117-130	7	8	9
131-147	8	9	
Choix Module (de 1 à 9)			



Référence Esthétique de pied :
ORT-KK-**XXY-Z**



Esthétique de pied disponible en 2 couleurs (**Z**):

- Caucasian (**CAUC**)
- BRUN (**BRUN**)



SYNERGY X3

de **ortotek**



L.P.P.R.



2713750



OKO SOLUTION Distributeur exclusif des Pieds Ortotek pour la France & les DROM-COM