

MOUSSE ESTHETIQUE PRÉFORMÉE



SNAP-COVER™ BK

Ne façonnez plus jamais un bloc de mousse

CARACTERISTIQUES :

- Réalisation très rapide : deux fois moins de temps qu'avec une mousse classique.
- Pas d'interférence avec la restitution d'énergie du pied.
- Absorbe tous les mouvements : antéro-postérieur, médio-latéral, chocs verticaux.
- Ne se déchire pas.
- Presque sans poussière.
- Le Snap-Cover™ est doté de la cheville DAWFlex™ qui élimine complètement toute traction ou tension, celle-ci évite que le collage entre le pied et la mousse ne se désolidarise.
- Disponible en 5 tailles, droite et gauche.


INCLUS :

- 2x chaussettes Dura-Stockings™ pour donner un aspect uniforme.
- 1x morceau supplémentaire de mousse DAW Silken-Foam™ (10 cm x 25 cm) pour modification éventuelle.

TAILLES	REFERENCE	Circ. cheville	Circ. mollet	Circ. emboiture	Taille du pied
X-Small, Gauche	DSCBK-XSL	22,5 cm	33,6 cm	27 - 34 cm	22 - 24 cm
X-Small, Droit	DSCBK-XSR	22,5 cm	33,6 cm	27 - 34 cm	22 - 24 cm
Small, Gauche	DSCBK-SL	23,5 cm	35,5 cm	28,8 - 36,25 cm	23 - 25 cm
Small, Droit	DSCBK-SR	23,5 cm	35,5 cm	28,8 - 36,25 cm	23 - 25 cm
Medium, Gauche	DSCBK-ML	25,4 cm	38,1 cm	31 - 38,75 cm	24 - 26 cm
Medium, Droit	DSCBK-MR	25,4 cm	38,1 cm	31 - 38,75 cm	24 - 26 cm
Large, Gauche	DSCBK-LL	26,7 cm	40,0 cm	34 - 40,6 cm	25 - 27 cm
Large, Droit	DSCBK-LR	26,7 cm	40,0 cm	34 - 40,6 cm	25 - 27 cm
X-Large, Gauche	DSCBK-XLL	28,6 cm	42,5 cm	35,6 - 43 cm	26 - 28 cm
X-Large, Droit	DSCBK-XLR	28,6 cm	42,5 cm	35,6 - 43 cm	26 - 28 cm

SNAP-COVER™ - Guide des tailles

Comment déterminer la bonne taille	Tailles	XS	SMALL	MEDIUM	LARGE	XL
1. Choisir la taille en fonction du tour de cheville : Vous ne pouvez pas ajouter de mousse à la cheville. Mais vous pouvez réduire celle-ci ainsi que la section alvéolée jusqu'à 1,9 cm de circonférence.	Circ. cheville	22,5 cm	23,75 cm	25,4 cm	26,7 cm	28,6 cm
2. Mesurez la circonférence du mollet : Vous pouvez réduire le mollet jusqu'à 3,8 cm de circonférence. Des couches de Silken-Foam™ peuvent être ajoutées à l'intérieur ou à l'extérieur du Snap-Cover™ pour obtenir le mollet souhaité.	Circ. mollet	33,6 cm	35,5 cm	38,1 cm	40 cm	42,5 cm
3. Mesurez la circonférence de l'emboîture : Vérifiez que la circonférence de votre emboîture se situe dans la fourchette recommandée.	Circ. de l'emboîture recommandée (au niveau de la crête tibiale)	27-34 cm	28,8-36,25 cm	31-38,75 cm	34-40,6 cm	35,6-43 cm
4. Choisir le bonne taille de pied.	Taille de pied	22-24 cm	23-25 cm	24-26 cm	25-27 cm	26-28 cm

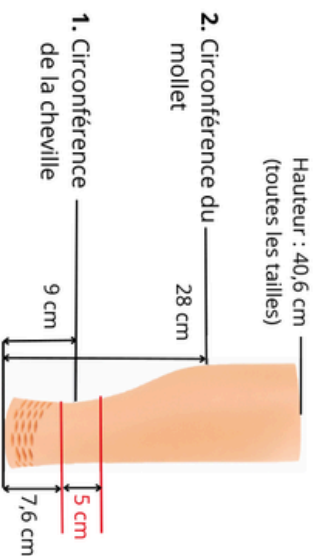

Épaisseur de la paroi = 12 mm
(Garder un minimum de 6 mm lors de la réalisation)

